


## Grind Meter

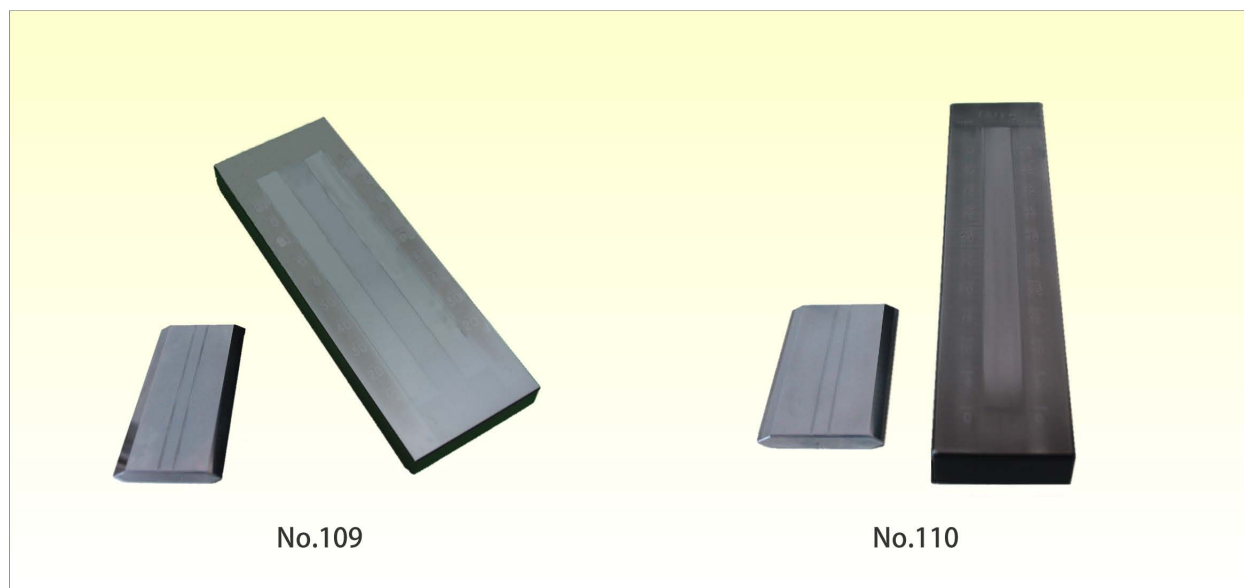

試料中の粒子の粒度や分散度を評価することができます。  
試料をスクレーパで塗布し、現れた線もしくは粒の位置で試料中の粒子の粒度、分散度を測定します。

※標準材質SKSの他、防錆・耐摩耗性に優れた硬質クロムメッキもあります。

	型番	レンジ	寸法	重量
双溝	GW 0- 25	0- 25 $\mu$	87W×240Lmm	約3.5kg
	GW 0- 50	0- 50 $\mu$	63W×180Lmm	約1.5kg
	GW 0-100	0-100 $\mu$	63W×180Lmm	約1.5kg
単溝	GS 0- 25	0- 25 $\mu$	63W×240Lmm	約2kg
	GS 0- 50	0- 50 $\mu$	40W×180Lmm	約1kg
	GS 0-100	0-100 $\mu$	40W×180Lmm	約1kg

- 構成  
 本体・・・・・・・・・・1台  
 スクレーパー・・・・1枚  
 収納木箱・・・・・・1個

※仕様等は、改良のため予告なく変更することがあります。